

M5 Corpus[®]

Geschaffen für mehr.



permobil

M5 Corpus[®]

Mehr Abenteuer

Der M5 Corpus ist geschaffen für mehr Abenteuer und ist damit für Nutzer gedacht, die sich mehr Geschwindigkeit, eine stärkere Motorisierung, größere Erhöhung, bessere Reichweite bei zugleich außergewöhnlichem Komfort sowie außergewöhnliche Stabilität und Traktion in unterschiedlichen Fahrsituationen wünschen. Mit leistungsstarken LED-Leuchten und erhöhter Batterielebensdauer bietet Ihnen der farbenfrohe neue M5 Corpus sogar noch viel mehr.

Active Reach

Kippt den Sitz um bis zu 20° nach vorne und hebt ihn für eine weitere funktionale Reichweite an, um Sie beim Ein- und Ausstieg und in Ihrem Alltag zu unterstützen.

Active Height

Fahren Sie bei voll ausgefahrenem Sitzlift mit bis zu 5 km/h und kombinieren damit nahtlos die Funktion *Active Reach* für einen ultimativen Vorteil beim Erleben Ihrer Umgebung.

Corpus: Das ultimative Sitzsystem

Verbesserungen bei Komfort, Beckenpositionierung, seitlicher Stabilität und dem Einsinken sind die wichtigsten Merkmale der neuen Corpus-Sitzkissen.


Die Corpus-Sitzkissen sind mit weicherem Zweischichtschaum an der Rückenlehne und einer neugestalteten Auflage zur Beckenpositionierung, mit Aussparungen und Stretch-Air™, ausgestattet. Der atmungsaktive und wasserfeste Kissenstoff ist bei 60°C maschinenwaschbar.

Mehr Kontrolle

Die *Agile*-Einzelradaufhängung funktioniert auf allen 6 Rädern und bietet höchsten Fahrkomfort sowie höchste Traktion und Stabilität für mehr Kontrolle, wenn Sie unterwegs sind.

Höhere Reichweite

Die neue Permobil-Batterie und das neue Permobil VoltPro Ladegerät ermöglichen Ihnen zusammen bis zu 25 % mehr Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer.

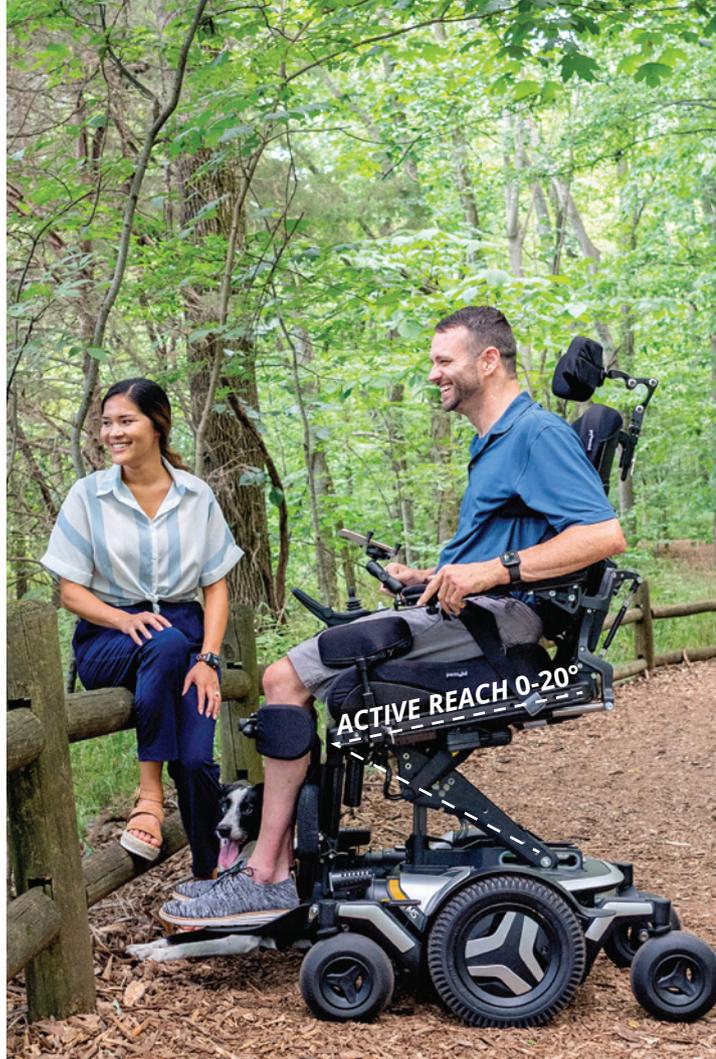

Mehr Abenteuer

MEHR KOMFORT

Das weichere Rückenkissen aus Zweischichtschaum und die neu konzipierte Auflage zur Beckenpositionierung mit Aussparungen erhöhen die Einsinktiefe in den Sitz und sorgen für mehr Komfort *und* Stabilität.

MEHR UNTERSTÜTZUNG

Das BodiLink®-Positionierungszubehör ist speziell für das Corpus-Sitzsystem angepasst. (optional)

MEHR FARBE

In der frischen neuen Optik können die Farboptionen der Abdeckung und Felgen kombiniert und Ihrem Stil angepasst werden.

MEHR SICHTBARKEIT

Die LED-Leuchten vorne und hinten sind extrem hell und sorgen für eine optimale Sichtbarkeit.

MEHR FREIHEIT

Sie bewegen sich in einer Vielzahl an Fahrpositionen mit erhöhter Stabilität.

MEHR STAURAUM

optionaler Gepäckkorb



M5 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 km/h (10 & 12 km/h optional)
Max. Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Nutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung	50 mm (100 mm)
Min. Wenderadius	1.120 mm
Drehen im Flur	1.130 mm
Federung	Agile
Elektronik R-Net	120 A
Crashtest ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja – max. Benutzergewicht 150 kg
Crashtest ISO 7176-19 - Dahl Dockingstation	Ja – max. Benutzergewicht 136 kg
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja
Max. Länge einschl. Sitz	1.170 mm
Basisbreite	630 mm
Breite inkl. Sitz und Armlehne	650–790 mm
Höhe	960–1.170 mm
Länge/Höhe Stauraum	880 mm / 870 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	194 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	450 mm
Sitzhöhenverstellung (ohne Kissen)	450–800 mm
Sitztiefe	370–570 mm (25 mm Schritte)
Sitzbreite	420–570 mm (50 mm Schritte)
Rückenlehnenbreite	360–510 mm (50 mm Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Kissen)	470; 545–670 mm (25 mm Schritte)
Armlehnenhöhe	185–320 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Rückenlehnenwinkeleinstellung (manuell)	90°–135°
Sitzwinkelverstellung - anteriore/posteriore Neigung	-20° bis +50°

*Die Reichweite kann je nach Benutzergewicht und Nutzung, wenn der Rollstuhl häufig auf Neigungen oder rauem Untergrund eingesetzt oder zum Überfahren von Bordsteinen genutzt wird, variieren.

Mehr Farben

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

Abweichungen zur Originalfarbe durch Druck möglich.



BEINSTÜTZE 90°–180°



SITZKANTELUNG NACH HINTEN 0–50°



SITZHÖHENVERSTELLUNG



ELEKTRISCHE RÜCKENLEHNE 85°–180°



SITZKANTELUNG NACH VORNE



MyPermobil



Längere Batterie-lebensdauer

Diese Angaben können variieren, abhängig von der Konfiguration des Stuhls. Bei bestimmten Konfigurationen können Beschränkungen der Sitzfunktionen möglich sein, abhängig vom Gewicht des Nutzers. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung, die Sie als Download auf der Website von Permobil finden. Oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Permobil Händler.

permobil.de | Tel. +49 2102 94 34 00 | E-Mail info@permobil.de

permobil



M5DATASHEETDE201019